

脂肪を観る 筋肉を観る BodyMetrix Personal

測るから観るへ

BodyMetrixの新しいBMIの測り方

BodyMetrix は手のひらサイズの装置で PC に接続し簡単に筋肉、脂肪の断層を観ることができます。

筋肉・脂肪の厚みを“観る”！

- ・脂肪や筋肉の厚みを高い精度で計測でき、断層画像で視覚的に確認することもできます。
- ・様々な部位で計測が可能のため、体全体の組成を知りトレーニング初期のプログラムが組みやすくなります。また、過去データの保存・取り出しが自由に行えるため、トレーニング 過程でもプログラム作りに反映できます。
- ・トレーニングの結果を視覚的に実感できることでモチベーションアップにつながります。
- ・リハビリ中の筋肉の回復状態も確認することが出来ます。



BodyMetrix は PC の USB ポートに付属のプローブを接続するだけで使用できます。


内容品：プローブ 1 台 ゲル 1 本 Windows パソコン用ソフトウェア

PC 動作環境：Windows XP 以降の OS で 32bit 又は 64bit メモリ 1GB 以上

対象者：6 歳以上の子供から成人まで

使用環境：[温度 0℃～60℃] [湿度 5%～95%] [高度 海拔 0 ～ 3500m]


BodyMetrix Personal 画面の一部

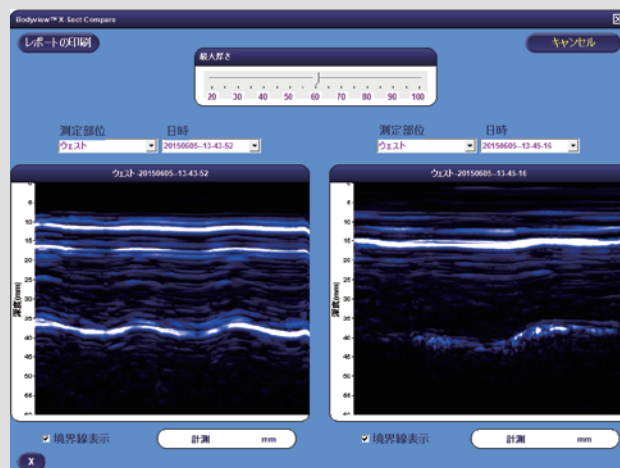

★体脂肪を分析する★



～ BodyMetrix 超音波計測のしくみ～

BodyMetrix システムのプロープの先端から出た超音波は、脂肪と筋肉の境目や筋肉と骨の境目で強い反射信号が発生します。その信号を検知することによって筋肉や脂肪の厚さを計測することができます。分析されたデータはレポートにより印刷もできます。

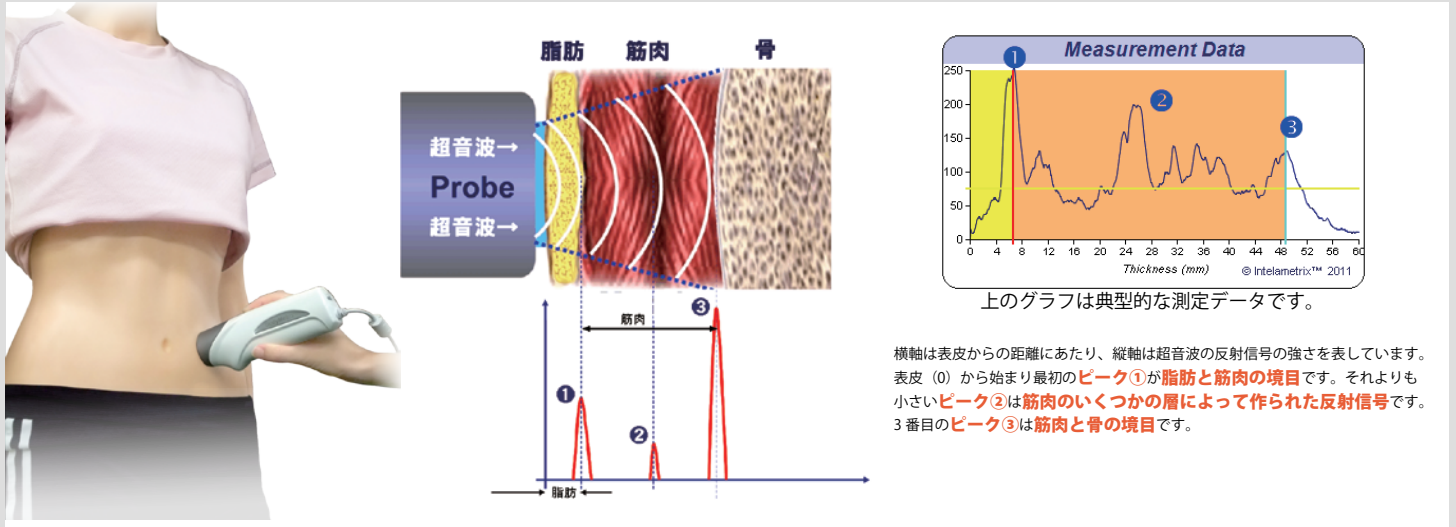


★脂肪 / 筋肉層の断面を評価する★

プローブをスライドさせ、脂肪 / 筋肉層を断面図で観ることもできます。

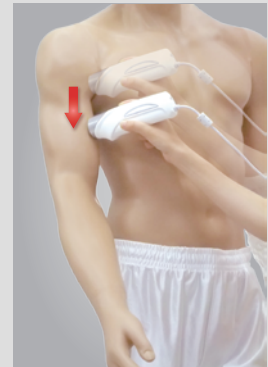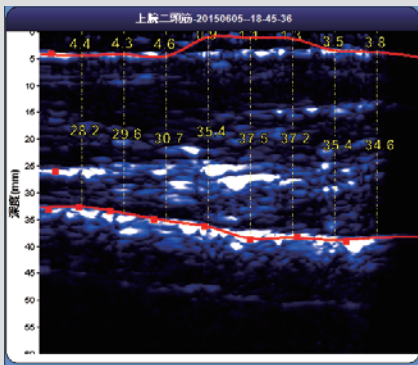

計測可能部位

- ・ウエスト
- ・腋窩 (わき)
- ・上腕三頭筋
- ・上腕二頭筋
- ・肩甲骨
- ・腰
- ・ヒップ
- ・胸
- ・ふくらはぎ
- ・大腿骨 (もも) など

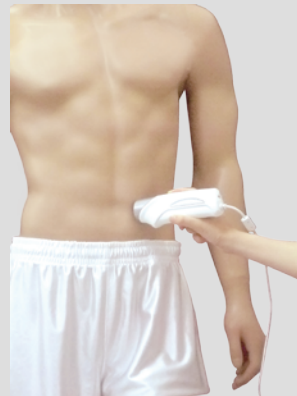

販売代理店

有限会社エクセルプラン

〒651-1505

兵庫県神戸市北区道場町日下部1716

TEL:078-950-2789 FAX:078-954-8005