

抗ウイルス加工



日本製

医療機器認証番号:

226ALBZX00015000 EC80G

226ALBZX00015A01 EC82G

マイケアオーエックス

MyCareOX

シリーズ

※カラー等は予告なく変更する場合があります。

多彩な
ディスプレイ

高精度大型LCD液晶で
バックライト付き
表示モードは2方向

軽量に

従来の単4電池2本タイプ
から1本タイプになり持ち
運びにも便利

付属品つき



ストラップは
取り外し可能



ストラップ、テスト用乾電池
各1個入り

指先挿入部が抗ウイルス加工になりました

計測時、指に触れる指先挿入部が抗ウイルス加工されて清潔に！

抗ウイルス作用の効果を実証するための試験を行いました（結果、下表）。

ISO 21702:2019

プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定

Virus and host cell	No.	Infectivity titre value immediate after inoculation of the reference specimen	Infectivity titre value after 24h contacting with the reference specimen	Infectivity titre value after 24h contacting with the test specimen
Influenza A virus H1N1: A/PR/8/34 (ATCC VR -1469)				
Host cell: MDCK	1	6.00	4.67	2.50
	2	5.88	4.57	2.50
	3	6.00	4.61	2.41
Antiviral efficacy value	← 抗ウイルス活性値		2.2	抗ウイルス性能基準は 2.0 以上
Antiviral activity rate (%)			99.3	

抗ウイルス活性値 2.2 で抗ウイルス作用があると証明されています。

※抗ウイルス効果として試験結果よりパルスオキシメーターの指接触部を通じたウイルス感染を防ぐ効果には言及できませんが、日常生活におけるウイルス感染を防ぐ効果は有しておりません。又、試験に用いたウイルス検体は A 型インフルエンザウイルスです。




指に触れる部分が清潔に

ディスプレイ表示




見やすいバックライト付き液晶

測定中、電源ボタンを長押しでバックライトが点灯

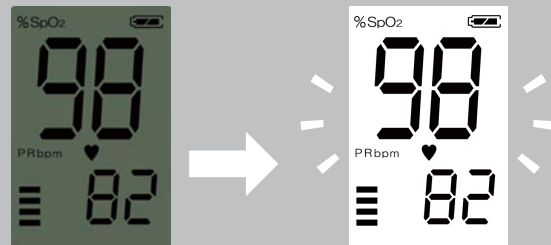

便利な2方向の表示モード※

測定中に電源ボタンを押すと表示方向が反転※

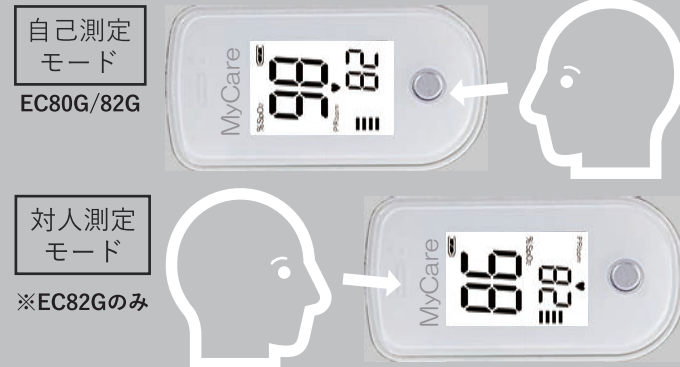

販売名	マイケアオーエックスシリーズ
型式	EC80G EC82G
ディスプレイ	2桁×1行(動脈血中酸素飽和度%) 3桁×1行(脈拍/分) 脈拍レベル(レベルメーター) 脈拍周期表示(♥)、電池残量
測定方式	2波長分光測光法
ディスプレイ照明	測定中にスイッチ長押し(3秒間)でバックライト 点灯/再度スイッチで消灯
表示範囲	SpO2 0~99%/脈拍 30~235bpm
測定範囲	SpO2 70~99%/脈拍 30~235bpm 脈拍 30 ~ 99:±2拍 / 分・/ 100 ~ 235:±2%
電源	単4型 1.5V ×1本
寸法	W34×D58×H38(mm)

重量	33g(電池含まず)
使用温湿度	5 ~ 40°C / 80%RH以下(結露がないこと)
保存温湿度	-20 ~ 55°C / 80%RH以下(結露がないこと)
医療機器分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器
認証番号	226ALBZX00015000 EC80G 226ALBZX00015A01 EC82G
保証期間	1年間
診療報酬	経皮的動脈血酸素飽和度測定 30点 歯科治療総合医療管理料 140点
製造元	株式会社トライアンドイー
総販売元	有限会社エクセルプラン

販売店

付属品(別売り)のご紹介

シリコン保護カバー

シリコン保護カバー(別売り)を取り付けると落下などの衝撃を軽減することができます。

インナーアジャスター

対象年齢が拡大します!

インナーアジャスター(別売り)を差し込むと今まで測りにくかった幼児や高齢者の細い指をしっかりと固定できます。



※測定部位には個人差があり全ての方の測定が可能なわけではありませんのでご了承下さい。当商品専用にデザインされています。他社製品へのご利用は出来ません。